



X-Mini
X-Micro

Mode d'emploi

Voir aussi "General Warnings and Safety Instructions", Page 13-17

F

Votre aide auditive.

X-Mini

Type de pile: **312**



Votre aide auditive.

X-Micro

Type de pile: **10**



Identification latérale de l'appareil:

Repère rouge = oreille droite
Repère bleu = oreille gauche




- ☐ S-écouteur
- ☐ M-écouteur
- ☐ P-écouteur
- ☐ HP-écouteur

● Votre audioprothésiste a sélectionné dans une gamme d'écouteurs externes de différentes longueurs et d'olives de différentes tailles le système optimal pour votre oreille.

Changement des piles.

- ☐ Type de pile: **10**
- ☐ Type de pile: **312**

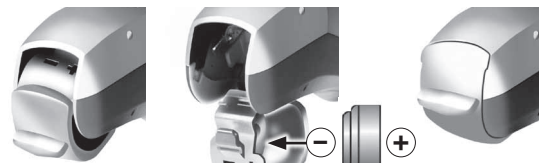

- Ouvrez le compartiment de la pile.
- Insérez-y celle-ci de telle sorte que le **pôle négatif** soit dirigé vers l'intérieur du compartiment.
- Refermez le tiroir.

● Lors de la mise en place d'une pile neuve peuvent s'écouler quelques minutes avant qu'elle n'ait déployer toute son énergie. Fermer alors seulement le compartiment (≈ 1 minute).

Mettre en place et retirer votre appareil.

N'utilisez pas de crème lors de l'introduction. Elle pourrait boucher l'écouteur.

- Si vos systèmes auditifs sont équipés d'un embout, ne tirez pas sur le câble de l'écouteur lors de l'introduction et de l'extraction. Saisissez toujours l'embout au moment de l'insertion et du retrait.

Insertion


- Arrêtez le système auditif.
- Saisissez l'olive/l'embout avec le pouce et l'index et introduisez-la/le avec précaution dans le conduit auditif. Il peut s'avérer utile de tirer légèrement le pavillon de l'oreille vers le haut ou l'arrière.
- Placez le système auditif derrière l'oreille.
- Allumez le système auditif.

Extraction

- Arrêtez le système auditif.
- Saisissez l'écouteur/l'embout avec le pouce et l'index et tirez-le avec précaution hors du conduit auditif. Il peut s'avérer utile d'exercer une légère pression sur le pavillon par l'arrière vers l'avant.

Mise en marche et arrêt de votre aide auditive.

☐ Avec le compartiment à pile

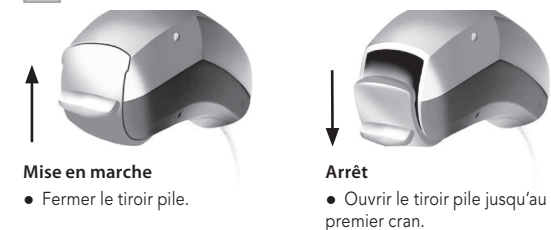

☐ Avec le sélecteur de programme



Mise en marche/Arrêt (stand by)

- Appuyez sur le bouton pendant 4 secondes.

☐ Avec la télécommande

- Les fonctions de la télécommande sont décrites dans un mode d'emploi séparé.

Réglage du volume.

☐ Avec potentiomètre

- Vous pouvez contrôler le volume de votre système auditif au moyen du dispositif de réglage progressif situé à l'arrière et gradué
- Option: télécommande

Dès que le volume maximal ou minimal sera atteint vous entendrez bips sonores



☐ Avec la télécommande

- Les fonctions de la télécommande sont décrites dans un mode d'emploi séparé.

Changement de programme d'écoute.

☐ Avec le sélecteur de programme

- Utiliser le sélecteur de programme pour choisir l'un des programmes sélectionnés individuellement pour vous.
- Lorsque vous passez d'un programme à l'autre, votre aide auditive vous indique le programme sélectionné par l'intermédiaire de bips sonores. Un nombre de bips correspond à un programme particulier (par ex.: 1er programme = 1 bip; 2e programme = 2 bips; 3e programme = 3 bips, 4e programme = 4 bips, 5e programme = mélodie, 6e programme = mélodie).
- Vous pouvez adapter votre appareil à chaque situation sonore et de ce fait profiter au mieux des avantages de la technologie MultiMic (micro directionnel), particulièrement lors de conversation en groupe.

☐ Avec la télécommande

- Les fonctions de la télécommande sont décrites dans un mode d'emploi séparé.

Élément de commande combiné.

☐ Changement de volume sonore et de programme auditif

- Volume sonore: appuyez brièvement (env. 1 seconde)
- Programme auditif: appuyez plus longtemps (env. 2 secondes)



Programme d'écoute/Description du programme d'écoute

1

2

3

4

5

6

Fonctionnalités en option.
☐ **i-com2 / Bi-Com**

- Cette fonction synchronise automatiquement les réglages de vos deux systèmes auditifs aux changements de réglage, par exemple volume ou programme.
- Elle permet d'utiliser une télécommande.

i Les performances d'e i-com2/Bi-Com peuvent varier en raison d'interférences électromagnétiques provenant, par exemple, d'un écran d'ordinateur ou d'une lampe halogène contrôlée par un système électrique de commutation.

- Eloignez-vous de la source d'interférences si l'écoute devient difficile.

☐ **Mise en route retardée**

- Ce dispositif vous permet d'allumer vos systèmes auditifs avec un retard automatique de 6, 12 ou 18 secondes afin d'éviter les sifflements.

☐ **Rappel d'entretien**

- Une musique vous rappelle la date du prochain entretien chez votre audioprothésiste.

☐ **Bobine téléphonique**

La bobine téléphonique permet le traitement d'un signal inductif (par exemple au téléphone). La captation du son à l'aide du microphone est réduite ou supprimée, dans ce cas.

Accessoires.
☐ **Télécommande eMote2**

La fonction wireless de vos systèmes auditifs vous permet de changer le programme et le volume sonore avec une télécommande. Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de votre audioprothésiste ou en consultant le manuel de la télécommande.



i Si vous constatez que votre système auditif peut être piloté avec la télécommande d'une autre personne, apportez les systèmes auditifs et la télécommande à votre audioprothésiste.

☐ **Télécommande miniMedia/Media**

La télécommande miniMedia/Media vous permet de combiner vos systèmes auditifs aux toutes nouvelles technologies.

Une connexion Bluetooth autorise la réception de signaux audio du portable, du téléviseur ou du lecteur MP3.

Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de votre audioprothésiste ou en consultant le manuel de la télécommande miniMedia/Media.



■ Merci de vous adresser à votre audioprothésiste pour toutes les questions concernant votre système auditif.

Conseils d'entretien.
Nettoyage quotidien

Pour le nettoyage de votre système auditif nous vous conseillons notre gamme de produits d'entretien HADEO, spécialement adaptée à votre aide auditive. Les produits HADEO sont uniquement disponibles chez votre audioprothésiste.

■ Ne mettez pas les systèmes auditifs sous l'eau.



- Nettoyez régulièrement votre système auditif afin d'éviter tout endommagement et tout risque d'irritation.
- Essuyez le cérumen à l'aide d'un chiffon doux.
- En cas de distorsion ou d'affaiblissement du son, adressez-vous à votre audioprothésiste pour faire remplacer le protège-micros.
- Le système auditif doit être conservés à sec. Placez-le dans un HADEO DryBox, un sac ou une boîte de séchage HADEO pendant la nuit afin d'en éliminer toute l'humidité.

Vos aides auditives possèdent un des éléments intra-auriculaires suivants:

☐ **Olive (Dôme)**
☐ **D'embout double (double dôme)**
☐ **Embout**


- Utilisez l'écouteur et le dôme en suivant scrupuleusement les instructions fournies dans ce guide.
 - Nettoyez les dômes, dômes à grille et embouts aussitôt après usage de vos systèmes auditifs. De cette manière, vous évitez la formation de cérumen sec et dur.
 - Essuyez le cérumen à l'aide d'un chiffon doux.
- Si nécessaire, humidifiez le chiffon avec un solvant lipophile.

i Seul un pare-cérumen parfaitement opérationnel permet d'assurer la fonctionnalité complète des dômes et embouts.


- Ne démontez pas l'embout vous-même.

Faites appel à votre audioprothésiste lorsque l'embout nécessite un nettoyage approfondi.

■ Les olives et embouts peuvent être facilement endommagés en cas de mauvaise utilisation.

Remplacement d'embouts (dômes)

L'enveloppe des embouts (dômes) est conçue avec une petite fente sur le côté pour séparer l'embout (le dôme) de l'écouteur.

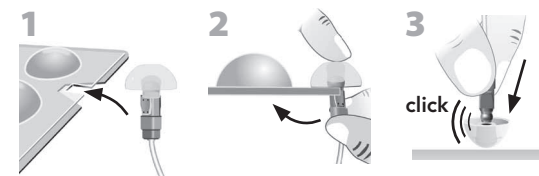
Remplacement d'embouts doubles (doubles dômes)

Manuel d'entretien

Vous obtiendrez une documentation sur la gamme HADEO chez votre audioprothésiste, qui pourra également vous conseiller sur l'entretien de votre système auditif.


Recherche d'erreurs.

Il sera souvent possible de régler les problèmes rencontrés au moyen des indications suivantes. Si ces indications ne vous permettent pas de résoudre le problème, veuillez vous adresser à votre audioprothésiste.

Problème	Cause possible	Solutions possibles
Le son est très faible.	Les piles sont presque déchargées. L'olive/l'embout est bouché(e) avec du cérumen (cire). Le volume sonore est trop faible.	Remplacer les piles. Nettoyer ou remplacer l'olive/l'embout. Augmenter le volume sonore (avec la télécommande). Remplacer le cache du microphone.
Le système auditif siffle.	Le système auditif n'est pas bien placé dans l'oreille. Le volume sonore est trop élevé. L'olive/l'embout est bouché(e) avec du cérumen (cire). Trop de cérumen (cire) dans l'oreille.	Remettre l'olive/l'embout en place. Réduire le volume sonore (avec la télécommande). Nettoyer l'olive/l'embout.
Le son est déformé.	Le volume sonore est trop élevé. Les piles sont presque déchargées.	Réduire le volume sonore (avec la télécommande). Remplacer les piles. Nettoyer l'olive/l'embout.
Le système auditif émet des signaux.	Le compartiment pile n'est pas complètement fermé. Les piles sont presque déchargées.	Fermer complètement le compartiment à pile. Remplacer les piles.
Le système auditif ne fonctionne pas.	Le système auditif n'est pas allumé. Le compartiment pile n'est pas complètement fermé. Les piles sont presque déchargées. La temporisation d'enclenchement est active.	Allumer le système auditif. Fermer complètement le compartiment à pile. Remplacer les piles. Insérer correctement la pile. Attendre 18 secondes et revérifier.